



adagyo

Oxigenación y eliminación
de toxinas mediante masaje linfático.



 **COCOON**
MEDICAL



adagyo

Múltiples tratamientos

adagyo no sólo está pensado para personas con retención de líquidos sino, que combina una gran variedad de masajes en diferentes tratamientos para adaptarse a las necesidades individuales de cada cliente.

Alta rentabilidad

gracias a la efectividad de sus tratamientos, el equipo adagyo es rápidamente amortizable. Las sesiones pueden realizarse en tiempos de 20 a 30 minutos permitiendo una mayor rotación de clientes y con un resultado más satisfactorio.

Garantía de calidad

adagyo ha sido diseñado y fabricado por un equipo de profesionales altamente cualificados. Los criterios empleados para el desarrollo de este equipo se sustentan en la experiencia de la marca **cocoon medical** en desarrollo de tecnología médico-estética.

adagyo

Oxigenación y eliminación de toxinas
mediante masaje linfático.



Combinación de masajes y
tratamientos. Resultados asegurados.

Resultados visibles, nuestra mejor garantía

Presoterapia, drenaje, reducción y reafirmación


La presoterapia es un método muy utilizado en medicina-estética para evitar la retención de líquidos y favorecer el drenaje sanguíneo. Actúa realizando un masaje activador de la circulación tanto venosa como linfática, obteniendo un efecto linfodrenante y estimulando la reabsorción de los líquidos intersticiales que no son reabsorbidos por el sistema venoso.

Las contracciones que provoca el masaje permiten la eliminación de líquidos y toxinas retenidas, favoreciendo la correcta circulación y ayudando a la nutrición de las células.

¿Cómo funciona adagyo?

adagyo actúa mediante cobertores o botas (especiales para presoterapia) que recubren las piernas, gluteos y abdomen, a través de las cuales se realiza sobre el cuerpo una presión positiva secuenciada de forma ascendente. A través de estas ondas de presión, adagyo estimula el sistema circulatorio, generando un drenaje linfático y favoreciendo la eliminación de líquidos, grasas y toxinas que generan la celulitis, edemas, linfoedemas y trastornos venosos como las várices.

La presión producida por adagyo trabaja de forma simultánea sobre tres zonas: músculo, tejido celular y sistema circulatorio.

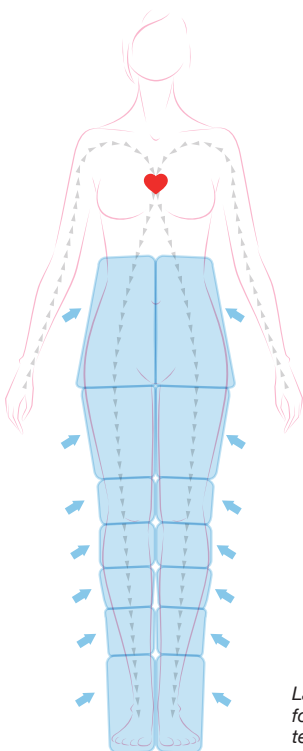

La presión producida por adagyo trabaja de forma simultánea sobre tres zonas: músculo, tejido celular y sistema circulatorio.

Efectos musculares: produce un efecto reafirmante y tonificante de las fibras musculares. Ayuda además a favorecer la movilización de los depósitos grasos del organismo favoreciendo un efecto reductor.


Efectos sobre el tejido celular: favorece la movilización y reabsorción de los líquidos intersticiales ayudando al drenaje.

Efectos circulatorios: favorece la circulación de retorno ayudando a la oxigenación del cuerpo.

Interfaz intuitiva

cocoon medical ha desarrollado para sus equipos interfaces muy intuitivas y de fácil utilización, ayudando a los usuarios a obtener los mejores resultados en sus tratamientos.

adagyo cuenta con una interfaz de fácil manejo en la que la pantalla muestra una imagen con siete celdas permitiendo al usuario seleccionar el número de celdas a trabajar facilitando la realización del tratamiento.

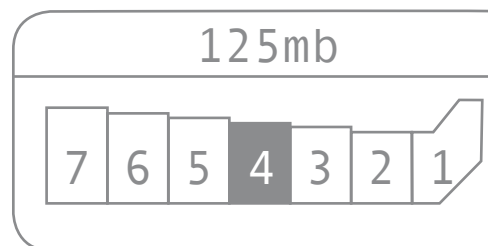

Pantalla táctil fácil de utilizar, con modo guiado que ayuda al usuario a lo largo del proceso

adagyo

Innovación y garantías

Diseño y practicidad

adagyo trabaja mediante botas secuenciales diseñadas para adaptarse perfectamente a la zona de tratamiento, desde los pies hasta la zona abdominal, con el objetivo de ejercer una presión uniforme sobre toda la superficie, garantizando la máxima eficacia.

Está fabricada con materiales muy resistentes y de facilidad para la limpieza, garantizando la higiene en los tratamientos. La bota consta de 14 entradas de aire, distribuidas uniformemente por toda la zona de tratamiento. Las celdas de la bota son de tipo escama de pez, lo que significa que las cámaras están solapadas entre sí.

Este diseño garantiza que la presión ejercida en la zona de tratamiento sea uniforme, evitando zonas de reflujos del aire o cúmulos de presión que puedan desembocar en retención de líquidos.

La bota se cierra mediante cremalleras. Ésta dispone de opciones de cerrado adaptables en función del cuerpo y el contorno del paciente, además de un extensor que tiene la función de ensanchar la bota, en caso de ser necesario. Una correcta adaptabilidad del cuerpo del paciente garantiza los resultados finales del tratamiento. El accesorio incorpora una zona adaptada para un cómodo asentamiento del pie del paciente.

Este equipo está además pensado para cumplir con todas las expectativas del paciente y del profesional, permitiendo pausar y reanudar el tratamiento en el mismo punto y saltar o anular celdas durante el tratamiento.



El accesorio principal de adagyo es la bota, encargada de ejercer la presión en el cuerpo del paciente.

Tratamiento de presoterapia

Los tratamientos adagyo están indicados especialmente para personas con problemas circulatorios y de retención de líquidos, sin embargo, son muchos los sistemas del cuerpo que pueden mejorar con tratamientos de presoterapia:

Mejora el sistema linfático debido al aumento de la circulación de la linfa, llevando a la eliminación de residuos metabólicos.

Mejora el sistema circulatorio aumentando la cantidad de oxígeno en el cuerpo y alivia la tensión sanguínea en extremidades.

Mejora el sistema digestivo relajando los músculos abdominales e intestinales facilitando su funcionamiento.

Mejora el sistema muscular proporcionando una relajación y alivio en caso de espasmos musculares.

Mejora la tonificación de la piel debido al aumento del riego sanguíneo facilitando la regeneración celular.

Recomendado como **tratamiento postoperatorio en cirugía estética** como la liposucción.

Las indicaciones para los tratamientos de adagyo son:

- Estimulación y mantenimiento de la circulación sanguínea y linfática.
- Prevención de varices (en sus síntomas previos como pesadez de las piernas, edemas, etc.).
- Varicosis del embarazo.
- Prevención de trombosis.
- Síndrome post-trombótico.
- Edemas venosos y linfáticos.
- Ulcus cruris.
- Profilaxis trombo embólica.
- Tratamientos post-quirúrgicos estéticos como la liposucción
- Post-operatorios.
- Celulitis y obesidad (mejora de la respuesta circulatoria).
- Prevención y mejora de atrofas y elasticidad del tejido
- Enfermedades neurológicas.
- Parálisis de las extremidades inferiores.
- Dolencias y espasmos musculares (relajación).
- Desintoxicación general del organismo.



make your patients' dreams come true

cocoon medical, es una empresa española, ubicada en Barcelona, creada con el objetivo de ofrecer la tecnología y la innovación al servicio de la medicina estética, siendo capaces de fabricar equipos médicos no invasivos para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

Formada por un equipo de profesionales altamente cualificados, **cocoon medical** se ha posicionado como una empresa puntera a nivel mundial por su continua capacidad de innovación y desarrollo. Ponemos la máxima confianza en nuestros partners tanto nacionales como internacionales para conocer las necesidades de cada mercado y así poder ofrecer las soluciones más innovadoras al servicio de nuestros clientes.

cocoon medical cuenta con las más altas certificaciones nacionales e internacionales de calidad, ofreciendo el mejor servicio en su campo.

www.cocoonmedical.com



High Technology Products
PASSATGE MASOLIVER, 24-28
08005 BARCELONA, SPAIN

Customer Service:
T. +34 934 588 566
info@cocoonmedical.com



Follow us on:

